


NEW

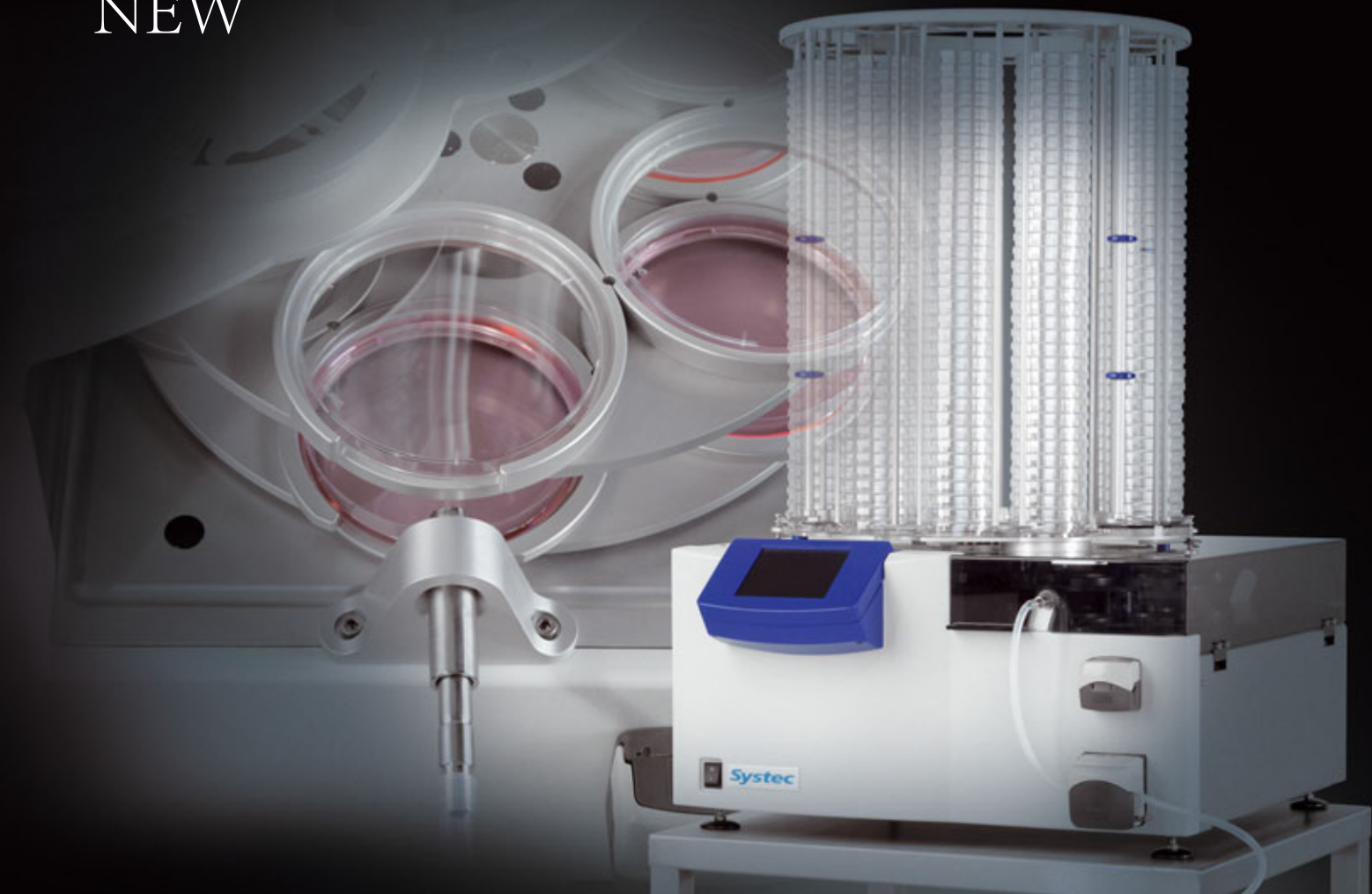

Systec Mediafill 系列 培养基分装系统

强大的革新力量，推动全自动培养基分装系统的创新。

Systec
the autoclave company

产品优势

- 5.7"触摸屏 — 简单、直观的操作系统
- 一键选择功能 — 内置数据库，可预设培养皿尺寸
- 全自动分装系统 — 灌装和堆叠无需人工干预
- 平稳、安静的灌装过程 — 独特的设计，最大程度的减少噪音
- 光滑平坦的铝质表面 — 易于清洁，无孔隙和裂缝，避免培养基流入
- 三种型号培养皿架 — 可根据使用选择 — 220、440和660个（高度为16.5mm培养皿）
- 易于装载 — 整个培养皿架可完全拆卸
- 内置蠕动泵（主泵） — 用于精确分装培养基
- 内置蠕动泵（附加泵） — 用于灌装时精确添加辅料
- 一体化控制 — 主泵和附加泵，均可通过分装系统主机的触摸屏进行控制
- 抗滴漏功能 — 防止灌装喷嘴处的液滴流下
- 振荡功能 — 可使用培养基更好的平铺在培养皿内
- 紫外灯（2.3W） — 用于分装时杀菌，防止细菌污染
- 手工分装功能 — 可通过脚踏开关或灌装延迟控制
- 半导体（Peltier）冷却功能 — 用于快速冷却灌装后的培养皿（选配）
- 打印功能 — 可直接打在培养皿上（选配）



	Mediafill	Stack 220	Stack 440	Stack 660
长(mm)	683			
宽(mm)	662			
高 (mm)	348	410	760	1010
直径 (mm)		566	566	566
总高度 (mm)		800	1140	1480
最大培养皿堆积高度(mm)		330	680	1030
可分装培养皿直径 (mm)		均可分装35、55、90		
可用培养皿高度范围(mm)		12~ 26	12~ 26	12~26
容量 (16.5mm高培养皿)		220	440	660
重量(kg)				
- Mediafill	37.5			
- 存储器 (不带培养皿)		6.9	8.4	9.9
- 添加剂泵 (可选)	0.5			
- 帕尔帖冷却系统 (可选)	1.7			

泵

主泵的分装范围 (ml) : 1-1000
主泵分装精度 (15ml时) : 1%
附加剂泵的分装范围 (%) : 3-10
最大分装速率
- 手工分装速率 (ml/min) : 1000
- 培养皿分装速率 (ml/min) : 500
分装间隔时间 (sec) : 0-10
紫外灯
功率 (w) : 9
紫外灯发射光功率 (w) : 2.3(254nm)
接口 : RS232
电源 : 100-240v, 50/60Hz

莱比信北京
地址：北京市通州区瑞都国际中心0806室
电话：010-60520271 60520122/0339/0815
传真：010-81570221
网站：www.labsun.net Email：info@labsun.net

莱比信上海
地址：上海市长宁区中山西路1277号海螺大厦1号楼602室
电话：021-51767117,51103181/82/83
传真：021-51767118
网站：www.labsun.net Email：info@labsun.net

莱比信广州
地址：广州市越秀区人民北路829号环球广场9层
电话：020-81719112/81719733
传真：020-81081927
网站：www.labsun.net Email：info@labsun.net

全国服务热线：

400-699-7881